

# Physiopack<sup>®</sup>

## Poche de gel polyvalente pour cryo/thermothérapie

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Application mixte de froid ou de chaleur selon l'indication pendant 20 min
- ▶ Économique : réutilisable
- ▶ Confortable : conserve sa souplesse dès la sortie du congélateur
- ▶ Facilement lavable
- ▶ Utilisation adaptée en physiothérapie et en post-opératoire
- ▶ Les poches du chapelet étant dissociables, cette présentation est particulièrement adaptée chez les canins
- ▶ Produit non toxique si ingéré
- ▶ Poche très résistante

### INDICATIONS

#### Application locale de froid : cryothérapie

- ▶ **En postopératoire immédiat** : pendant les 24 à 72 heures suivant une intervention chirurgicale pour favoriser l'hémostase des capillaires, limiter la formation d'œdème (peut être associée à une compression), lutter contre la douleur, limiter l'inflammation,
- ▶ **En traumatologie** : pendant les 24 à 72 heures suivant une contusion (ecchymose, hématome), un traumatisme articulaire (entorse), musculaire (élongation, déchirure), tendineux (tendinite, ténosynovite), une bursite, une brûlure,
- ▶ **En physiothérapie** pour réaliser une analgésie et permettre quelques mobilisations, pour diminuer l'inflammation.

#### Application locale de chaleur : thermothérapie

- ▶ **Lutte contre la douleur**, lors d'inflammation chronique aseptique,
- ▶ **En traumatologie** : au-delà du 3<sup>e</sup> jour après un traumatisme pour favoriser la cicatrisation, pour lever les contractures musculaires,
- ▶ **En physiothérapie** : avant mobilisation lors de raideur articulaire ou d'ankylose (diminution de l'amplitude de mouvement), pour son action décontractante.

### ÉTUDE DE CAS N°1

#### ▶ Cas pratique de physiothérapie

Un chien présentant une polyarthrite non infectieuse.



- Application de froid pour diminuer l'inflammation et la douleur.



La souplesse du Physiopack<sup>®</sup> permet de l'appliquer sur toute la circonférence du membre. Après l'application, le chien semblait moins douloureux.

#### MODE D'EMPLOI

##### En cryothérapie :

- Laisser 1 h 30 à 2 h au congélateur à -15°C.

##### En thermothérapie :

- Au bain-marie (eau bouillante) : immersion pendant 8 mn maximum
- Au four à micro-ondes : chauffer par périodes de 20 secondes maximum selon le type de la puissance de l'appareil et selon la taille du sachet utilisé. Physiopack<sup>®</sup> atteint 45° C à 60° C en 1 mn (3 périodes de 20 secondes)
- Protéger la zone à refroidir ou à réchauffer par un linge ou une feuille en non-tissé

## ÉTUDE DE CAS N°2




### ► Application en postopératoire après résection de tête fémorale

Chienne berger allemand de 7 ans présentant une dysplasie coxo-fémorale sévère avec beaucoup d'arthrose.

- Résection de tête fémorale avec application de Physiopack® **en postopératoire immédiat.**
- Pendant les 3 jours suivant l'intervention, application de Physiopack® (20 minutes, 2 ou 3 fois par jour) pour lutter contre la douleur, limiter le développement de l'œdème, favoriser l'hémostasie.

Illustration de l'efficacité de l'action de froid en postopératoire par comparaison de la possibilité de l'extension de l'articulation coxo-fémorale avant et après application de Physiopack® ►

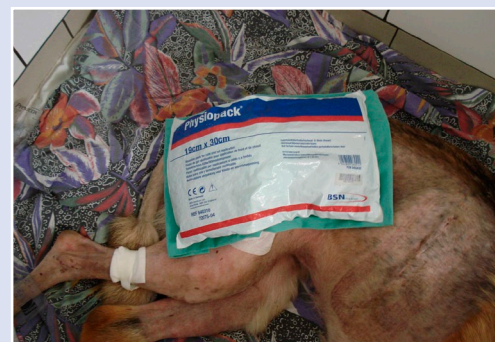

#### PRÉSENTATION

- Plusieurs formats disponibles : 7 x 38 cm, 13 x 30 cm, 19 x 30 cm
- Existe en **boîte individuelle** avec housse de protection ou **en vrac** sans housse de protection

► Physiopack® disponible dans votre centrale

| Présentation      | Conditionnement    | Code*       |
|-------------------|--------------------|-------------|
| 7 x 38 cm (vrac)  | Carton de 12 packs | 72075-00001 |
| 13 x 30 cm (vrac) | Carton de 12 packs | 72075-00002 |
| 19 x 30 cm (vrac) | Carton de 6 packs  | 72075-00004 |

\*Code BSN medical